

ΗΜVΟ

Entersoft Business Suite[®]

Λειτουργικότητα ΗΜVΟ

Περιεχόμενα

1.	Version 5.10.0.1	3
1.1	Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΗΜΒΟ)	3
2.	Version 5.10.0.2	5
2.1	Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΗΜΒΟ)	5
2.1.1	Layout οθόνης επαλήθευσης	5
2.1.2	Προειδοποίηση εκτέλεσης ενεργειών decommission	5
2.1.3	Χειροκίνητη συμπλήρωση στοιχείων barcode	6
2.1.4	Κατάσταση καταγραφών ΗΜΒΣ	6
3.	Version 5.12.0.0	7
3.1	Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΗΜΒΟ)	7
3.1.1	Κατάλογος προϊόντων ΗΜΒΣ	7
3.1.2	Κλήση οθόνης καταγραφής σκευασμάτων από παραστατικά	7
4.	Version 5.12.0.4	9
4.1	Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΗΜΒΟ)	9
4.1.1	Δυνατότητα κλήσης ενεργειών ΗΜΒΟ από αυτοματισμό σε όψη	9
5.	Παράρτημα	10
5.1	Έλεγχος γλώσσας	10
5.2	CapsLock	10

- **HMVO - Περιβάλλον λειτουργίας:** Στην οποία επιλέγουμε αν η διασύνδεση αφορά το Παραγωγικό περιβάλλον, το δοκιμαστικό περιβάλλον (ITE) ή το δοκιμαστικό περιβάλλον πιστοποίησης (IQE).
- **HMVO - κάμερα σκαναρίσματος πολλαπλών barcode:** Στην οποία επιλέγουμε την διασύνδεση με το σύστημα αναγνώρισης πολλαπλών barcode **Robovision**.

Γενικά	Κατηγορία παραμέτρων			
	Εταιρείες/Υποκαταστήματα/Χρήσ			
	Παράμετροι Εταιρείας			
	Ομάδες χρηστών			
	Διαχείριση χρηστών			
	Προφίλ επικοινωνίας			
	Γλώσσες			
	Ημερολόγια			
	Παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών			
	1	HMVO - Κάμερα σκαναρίσματος πολλαπλών barcode	Ολοκλήρωση	HMVO_BARCODE_CAMERA
	2	HMVO - Περιβάλλον λειτουργίας	Ολοκλήρωση	HMVO_ENV



Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του συστήματος **Robovision** (<https://www.robovision.gr/index.php/el/>) παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Entersoft.

Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν οι τοποθεσίες που έχουν ανοιχτεί στο HMVS με τα credentials για το αντίστοιχο περιβάλλον επικοινωνίας.


Γενικά	Κωδικός				
	Περιγραφή				
	Εξοπλισμός				
	Διαπιστευτήρια				
	Ανενεργό				
	1	001	Location 1	TEST-PC	
		*			
	Παραγωγικό περιβάλλον				
	Αναγνωριστικό				
	Μυστικό				
	Δοκιμαστικό περιβάλλον IQE				
	Αναγνωριστικό				
	Μυστικό				
	Δοκιμαστικό περιβάλλον ITE				
	Αναγνωριστικό				
	Μυστικό				
	Αποδοχή				
	Ακύρω				

2. Version 5.10.0.2

2.1 Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO)

2.1.1 Layout οθόνης επαλήθευσης

Δημιουργήθηκε νέο layout το οποίο ενεργοποιείται σε scanning mode «Τελευταίο σκανάρισμα» δηλαδή όταν γίνεται αυτόνομη επαλήθευση για κάθε barcode. Το συγκεκριμένο layout περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που επιστρέφει το HMVS για το συγκεκριμένο barcode.

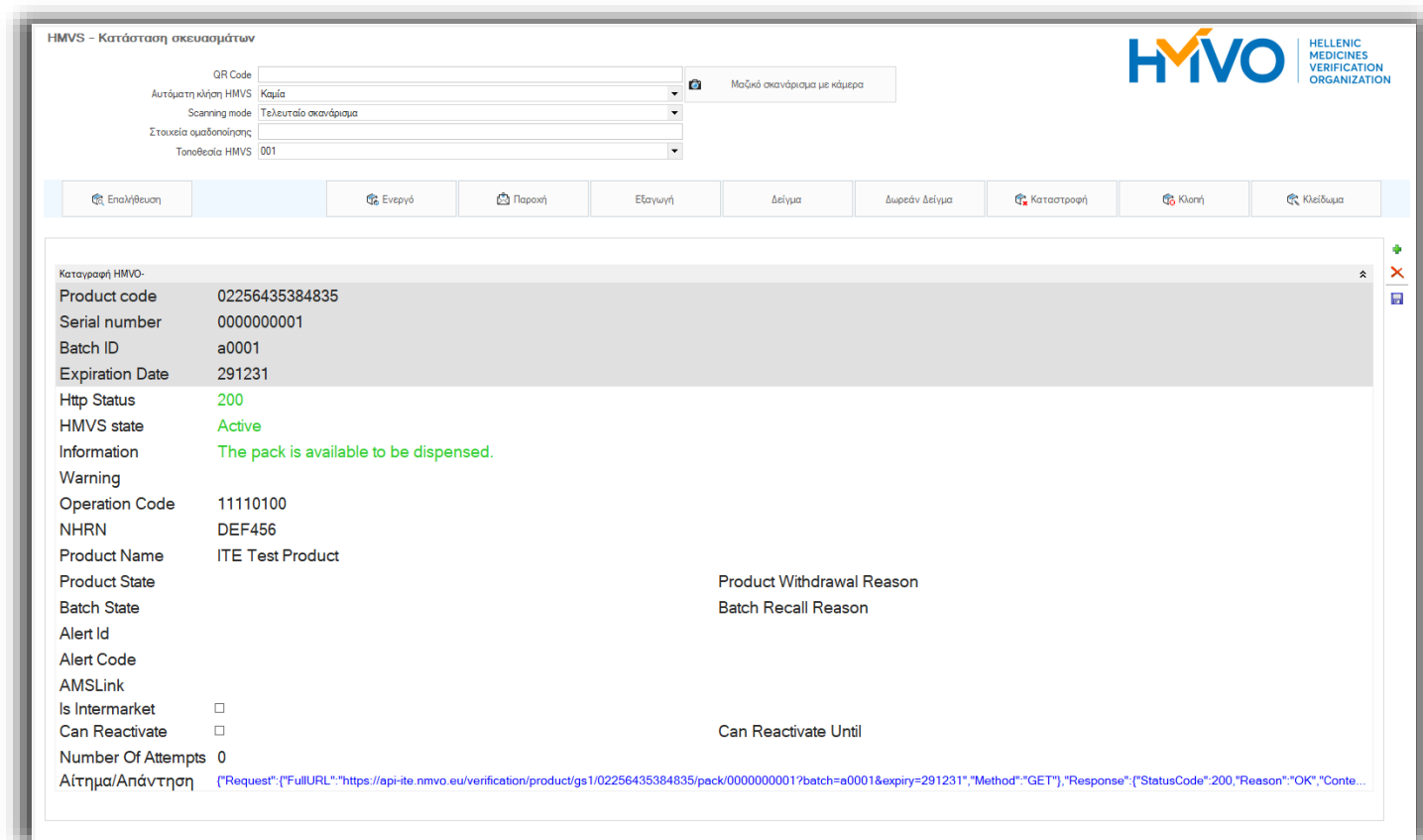


The screenshot displays the HMVS - Κατάσταση σκευασμάτων (HMVS - Medication Status) interface. The top section includes input fields for QR Code, Automa klishi HMVS (set to Καμία), Scanning mode (set to Τελευταίο σκανάρισμα), Στοιχεία ομαδοποίησης, and Τοποθεσία HMVS (set to 001). A button for 'Μαζικό σκανάρισμα με κάμερα' is also present. Below these fields is a navigation bar with buttons: Επαλήθευση, Ενεργό, Παροχή, Εξαγωγή, Δείγμα, Δωρεάν Δείγμα, Καταστροφή, Κλοπή, and Κλείδωμα. The main content area shows a detailed view of a product with the following information:

Καταγραφή HMVO-	
Product code	02256435384835
Serial number	0000000001
Batch ID	a0001
Expiration Date	291231
Http Status	200
HMVS state	Active
Information	The pack is available to be dispensed.
Warning	
Operation Code	11110100
NHRN	DEF456
Product Name	ITE Test Product
Product State	
Batch State	
Alert Id	
Alert Code	
AMSLink	
Is Intermarket	☐
Can Reactivate	☐
Number Of Attempts	0
Αίτημα/Απάντηση	("Request":{"FullURL":"https://api-ite.nmvo.eu/verification/product/gs1/02256435384835/pack/0000000001?batch=a0001&expiry=291231","Method":"GET"},"Response":{"StatusCode":200,"Reason":"OK","Conte...

Additional fields on the right side include Product Withdrawal Reason, Batch Recall Reason, and Can Reactivate Until.

2.1.2 Προειδοποίηση εκτέλεσης ενεργειών decommission


Κατόπιν ενημέρωσης από τον HMVO ενεργοποιήθηκε ο παρακάτω προειδοποιητικός έλεγχος για τις ενέργειες καταστροφής και κλοπής.

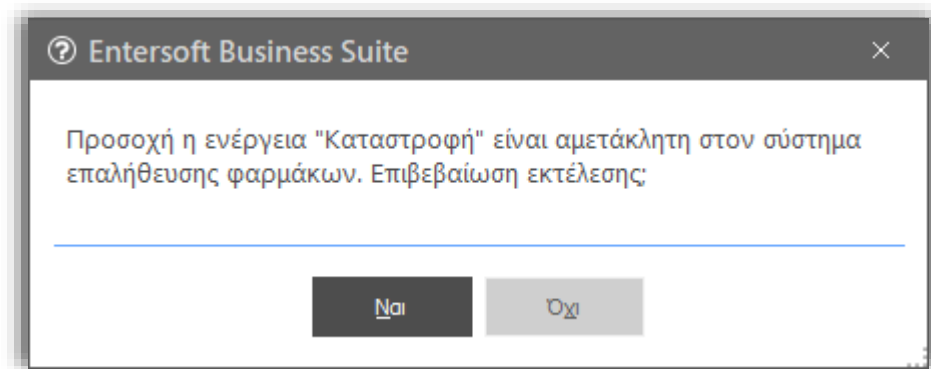

The screenshot shows a dialog box titled 'Entersoft Business Suite'. The message inside reads: 'Προσοχή η ενέργεια "Καταστροφή" είναι αμετάκλητη στον σύστημα επαλήθευσης φαρμάκων. Επιβεβαίωση εκτέλεσης:' (Warning, the 'Destruction' action is irreversible in the medication verification system. Confirmation of execution:). Below the message are two buttons: 'Ναι' (Yes) and 'Όχι' (No).


2.1.3 Χειροκίνητη συμπλήρωση στοιχείων barcode

Υποστηρίχθηκε η χειροκίνητη συμπλήρωση των στοιχείων ενός barcode σε περίπτωση αδυναμίας από το barcode reader. Αρκεί η προσθήκη των παρακάτω πεδίων και ενεργειών στη δυναμική φόρμα επαλήθευσης των σκευασμάτων.

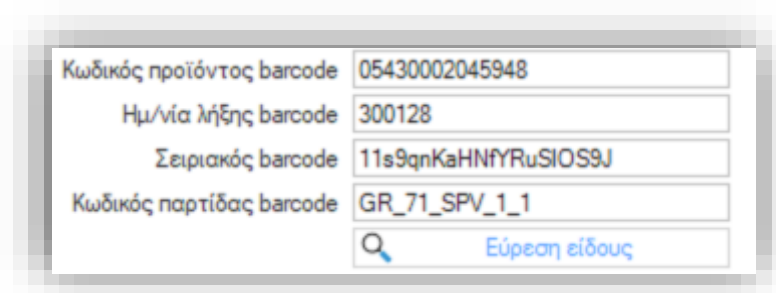

2.1.4 Κατάσταση καταγραφών HMVS

Προστέθηκε στο μενού *Αποθήκες & αποθέματα / Διασύνδεση με HMVO / Κατάσταση καταγραφών* η όψη «Κατάσταση καταγραφών HMVS» στην οποία αποτυπώνονται οι αναλυτικές καταγραφές προς το Σύστημα επαλήθευσης σκευασμάτων.

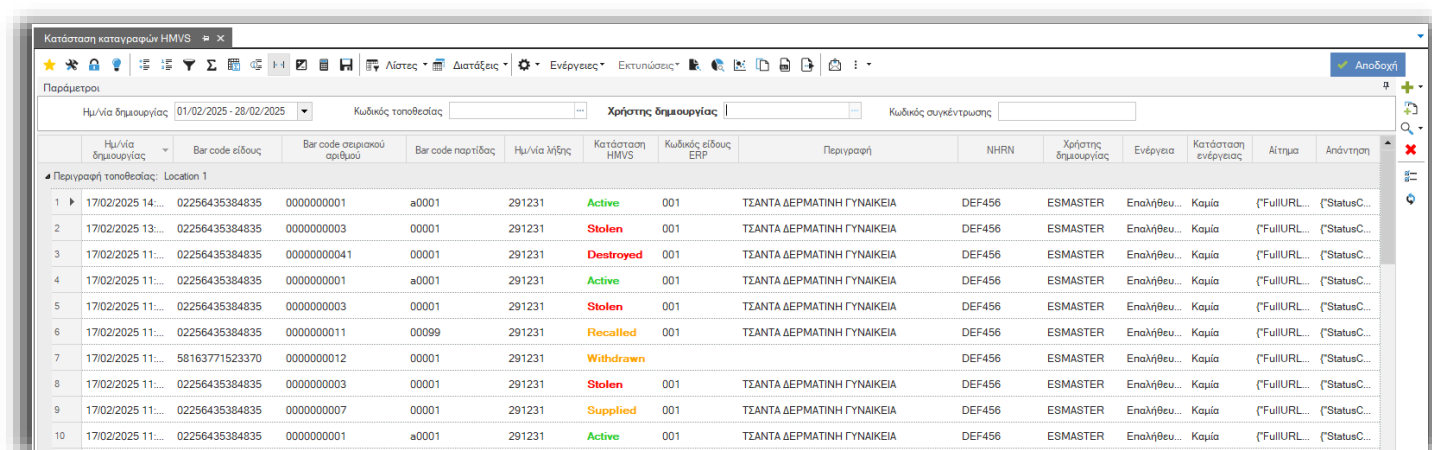


	Ημ/νία δημοσίευσης	Bar code είδους	Bar code σειριακού αριθμού	Bar code παρτίδας	Ημ/νία λήξης	Κατάσταση HMVS	Κωδικός είδους ERP	Περιγραφή	NHRN	Χρήστης δημοσίευσης	Ενέργεια	Κατάσταση ενέργειας	Αίτιμα	Απάντηση
1	17/02/2025 14:...	02256435384835	0000000001	a0001	291231	Active	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
2	17/02/2025 13:...	02256435384835	0000000003	00001	291231	Stolen	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
3	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000004	00001	291231	Destroyed	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
4	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000001	a0001	291231	Active	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
5	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000003	00001	291231	Stolen	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
6	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000011	00099	291231	Recalled	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
7	17/02/2025 11:...	58163771523370	0000000012	00001	291231	Withdrawn			DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
8	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000003	00001	291231	Stolen	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
9	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000007	00001	291231	Supplied	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...
10	17/02/2025 11:...	02256435384835	0000000001	a0001	291231	Active	001	ΤΖΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	DEF456	ESMASTER	Επαλήθευ...	Καμία	(*FullURL...	(*StatusC...

3. Version 5.12.0.0

3.1 Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO)


3.1.1 Κατάλογος προϊόντων HMVS

Δόθηκε η δυνατότητα λήψης του καταλόγου προϊόντων από το HMVS ο οποίος περιλαμβάνει την αντιστοίχιση μεταξύ κωδικού προϊόντος (GTIN) και εθνικού κωδικού (NHRN).

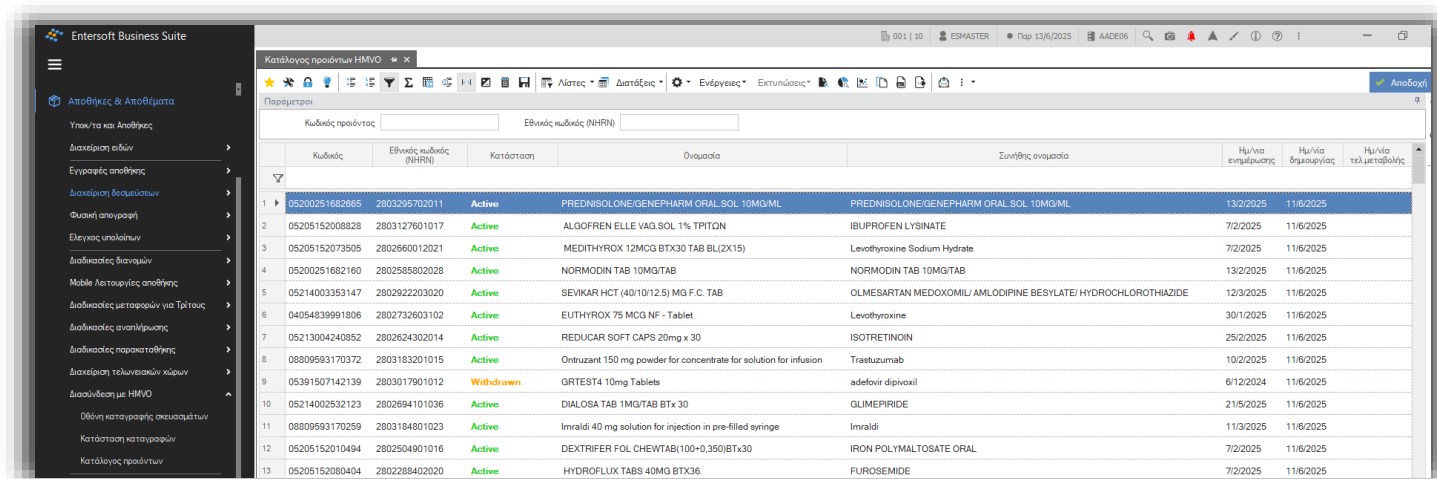

Κωδικός προϊόντος	Εθνικός κωδικός (NHRN)	Κατάσταση	Όνομασία	Συνήθης ονομασία	Ημ/να ενημέρωσης	Ημ/να δημόσιας	Ημ/να τελ.μεταβολής
05200251682665	2803295702011	Active	PREDNISOLONE/GENEPHARM ORAL SOL 10MG/ML	PREDNISOLONE/GENEPHARM ORAL SOL 10MG/ML	13/2/2025	11/6/2025	
05205152008828	2803127601017	Active	ALGOFFREN ELLE VAG.SOL 1% TPITON	IBUPROFEN LYSINATE	7/2/2025	11/6/2025	
05205152073505	2802660012021	Active	MEDITHYROX 12MCG BTX30 TAB BL(2X15)	Levothyroxine Sodium Hydrate	7/2/2025	11/6/2025	
05200251682160	2802585802028	Active	NORMODIN TAB 10MG/TAB	NORMODIN TAB 10MG/TAB	13/2/2025	11/6/2025	
05214003353147	2802922203020	Active	SEVIKAR HCT (40/10/12.5) MG F.C. TAB	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE BESYLATE/ HYDROCHLOROTHIAZIDE	12/3/2025	11/6/2025	
04054839991806	2802732603102	Active	EUTHYROX 75 MCG NF - Tablet	Levothyroxine	30/1/2025	11/6/2025	
05213004240852	2802624302014	Active	REDUCAR SOFT CAPS 20mg x 30	ISOTRETINOIN	25/2/2025	11/6/2025	
08809593170372	2803183201015	Active	Ontuzant 150 mg powder for concentrate for solution for infusion	Trastuzumab	10/2/2025	11/6/2025	
05391507142139	2803017901012	Withdrawn	GRTEST4 10mg Tablets	adefovir dipivoxil	6/12/2024	11/6/2025	
05214002532123	2802694101036	Active	DIALOSA TAB 1MG/TAB BTx 30	GLIMEPIRIDE	21/5/2025	11/6/2025	
08809593170259	2803184801023	Active	Imvaldi 40 mg solution for injection in pre-filled syringe	Imvaldi	11/3/2025	11/6/2025	
05205152010494	2802504901016	Active	DEXTRIFER FOL CHEWITAB(100+0.350)BTx30	IRON POLYMALTOSATE ORAL	7/2/2025	11/6/2025	
05205152080404	280228402020	Active	HYDROFLUX TABS 40MG BTX36	FUROSEMIDE	7/2/2025	11/6/2025	

Η λήψη πραγματοποιείται από την σχετική ενέργεια «Λήψη καταλόγου προϊόντων από HMVS» που υπάρχει στην όψη που βρίσκεται στην περιοχή «Αποθήκες & Αποθέματα / Διασύνδεση με HMVO / Κατάλογος προϊόντων».


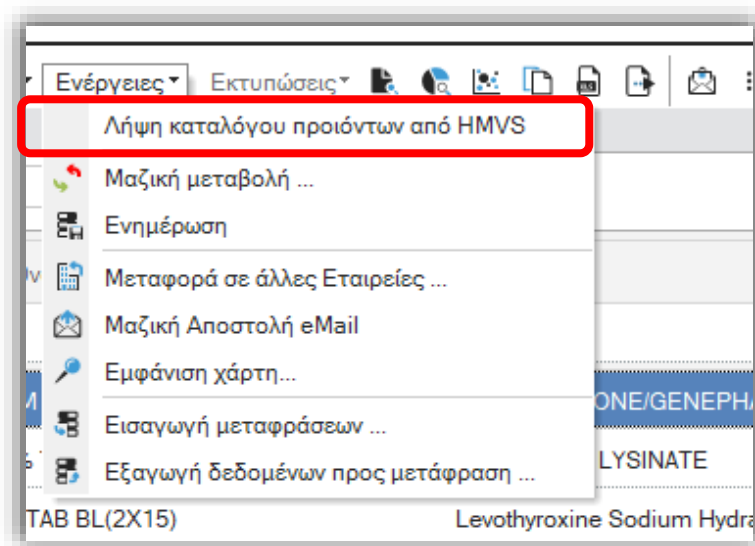


3.1.2 Κλήση οθόνης καταγραφής σκευασμάτων από παραστατικά

Δόθηκε η δυνατότητα κλήσης της οθόνης καταγραφής σκευασμάτων μέσα από συγκεκριμένο παραστατικό με αποτέλεσμα η καταγραφή των σκευασμάτων να γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένου παραστατικού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έρχεται να καλύψει ροές εκτέλεσης που λαμβάνουν χώρα σε αποθήκες - φαρμακαποθήκες όπου γίνεται σε προγενέστερο χρόνο η προετοιμασία των αποστολών - συσκευασιών και ακολουθεί η έκδοση των παραστατικών διακίνησης.

Συγκεκριμένα, στην toolbar εκτέλεσης commands, προστέθηκε νέα ενέργεια «Σκανάρισμα γραμμωτού κώδικα QR (HMVS)» η οποία παίρνει ως παραμέτρους το είδος ενέργειας και το scanning mode. Για παράδειγμα συμπληρώνοντας «Verify||KeepOld» θα ανοίγει η οθόνη καταγραφής με default ενέργεια «Επαλήθευση», scanning mode «Λίστα σκαναρισμένων» και συμπληρωμένο τον κωδικό παραστατικού στα στοιχεία ομαδοποίησης της οθόνης.

Σημείωση: Σε όλες τις καταγραφές που γίνονται στα πλαίσια συγκεκριμένου παραστατικού, συμπληρώνεται το σχετικό fDocumentGID.

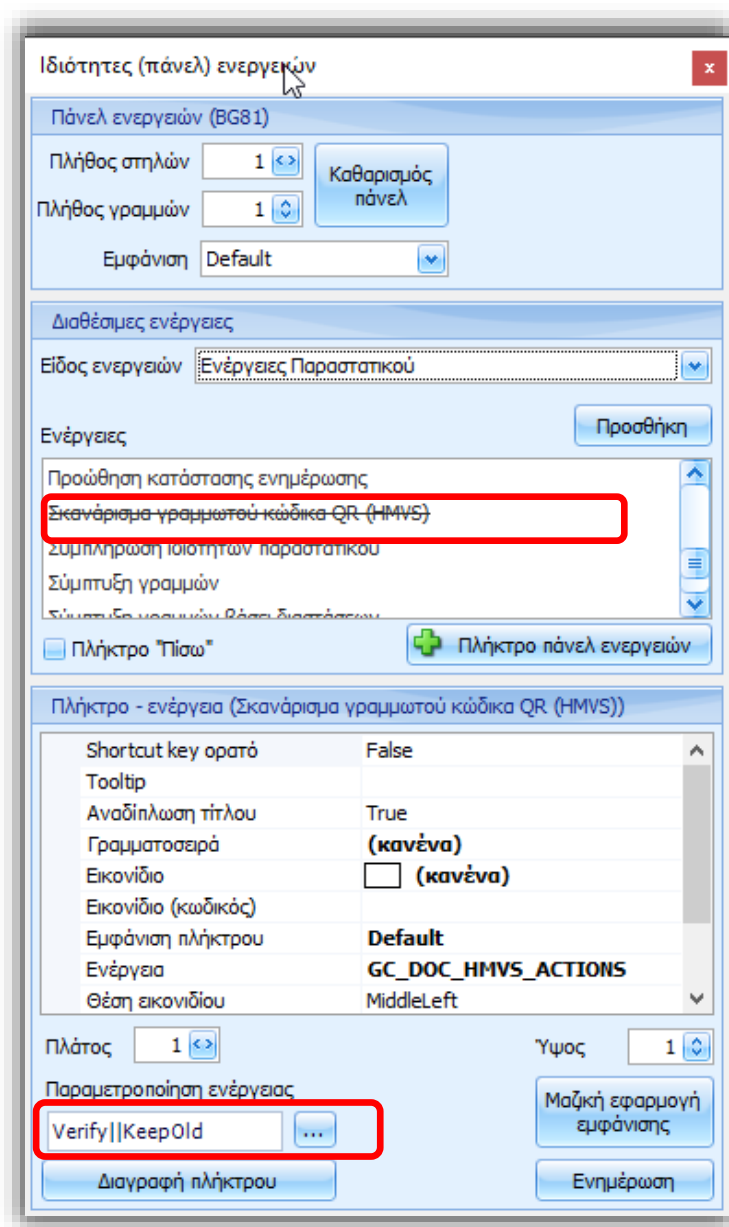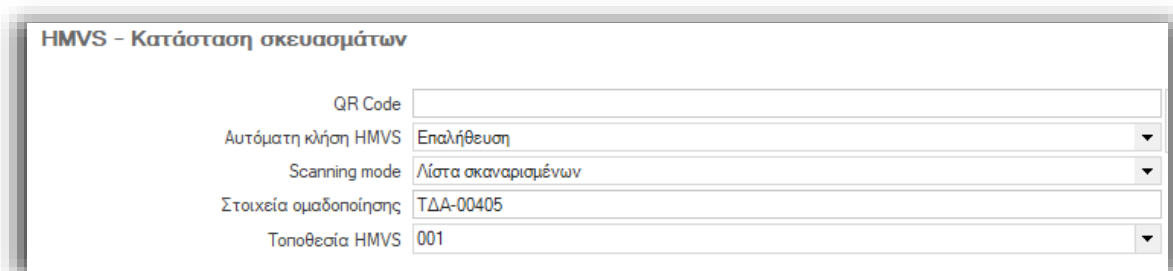4. Version 5.12.0.4

4.1 Διασύνδεση με Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO)

4.1.1 Δυνατότητα κλήσης ενεργειών HMVO από αυτοματισμό σε όψη

Στην 5.12.0.4 υπάρχει πλέον η δυνατότητα **ετεροχρονισμένων HMVO ενεργειών** (decommission, κλπ.) από αυτοματισμό σε όψεις, ο οποίος θα παρουσιάζει τα δεδομένα των σκαναρισμένων QR ανάλογα τις ροές του κάθε πελάτη.

Η VB έκφραση αυτοματισμού έχει ως εξής:

```
#references ESMHMVOISUD.dll
#imports Entersoft.ERP.MaterialsMgmt.DS.HMVO

Dim prms As New Dictionary(of string, object)()
prms!LocationCode="www"
prms!ProductCode="05430002045948"
prms!SerialNumber="10dcQbKkscQr4ehQIBQ7"
prms!Expiration="300128"
prms!BatchID="GR_71_BV_3"
prms!BatchCode="SCAN-20.06.2025"
prms!fDocumentGID="4E458D01-AA5B-46A1-A822-53D16FF69EF4"
prms!fItemGID="70CA50DE-8CED-43E1-BCB0-57F6EB2FA2D0"
prms!IsManual=False
prms!IsPPN=False

BarcodeHandler.ExecuteCommand(session,"HMVO_SCAN_ONLY",prms)

return Nothing
```

Τύπος

VB έκφραση

```
1 #references ESMHMVOISUD.dll
2 #imports Entersoft.ERP.MaterialsMgmt.DS.HMVO
3
4 Dim prms As New Dictionary(of string, object)()
5 prms!LocationCode="www"
6 prms!ProductCode="05430002045948"
7 prms!SerialNumber="10dcQbKkscQr4ehQIBQ7"
8 prms!Expiration="300128"
9 prms!BatchID="GR_71_BV_3"
10 prms!BatchCode="SCAN-20.06.2025"
11 prms!fDocumentGID="4E458D01-AA5B-46A1-A822-53D16FF69EF4"
12 prms!fItemGID="70CA50DE-8CED-43E1-BCB0-57F6EB2FA2D0"
13 prms!IsManual=False
14 prms!IsPPN=False
15
16 BarcodeHandler.ExecuteCommand(session,"HMVO_SCAN_ONLY",prms)
17
18 return Nothing
```

VB έκφραση αυτοματισμού κλήσης ενεργειών HMVO

5. Παράρτημα

5.1 Έλεγχος γλώσσας

Το πρόβλημα με τα Ελληνικά (όταν είναι επιλεγμένη γλώσσα υπολογιστή κατά την διάρκεια σκαναρίσματος) εντοπίστηκε κατά την ανάπτυξη, και τότε έγινε η απαραίτητη διόρθωση. Οπότε, στο άνοιγμα της φόρμας, γίνεται αυτόματα η αλλαγή γλώσσας από Ελληνικά σε Αγγλικά και είναι διαθέσιμο από την έκδοση 5.10.0.1 (11.02.2025). Έγιναν ορισμένες βελτιώσεις με check in στην 5.10.1.30 (08.04.2025).

5.2 CapsLock

Για το πρόβλημα με το CapsLock, προστέθηκε έλεγχος που κοιτάει αν είναι ενεργοποιημένο το CapsLock. Σε περίπτωση που ισχύει, τότε εμφανίζεται το παρακάτω ειδοποιητικό μήνυμα, που προτρέπει τον χρήστη να απενεργοποιήσει το CapsLock.

